


Fergus

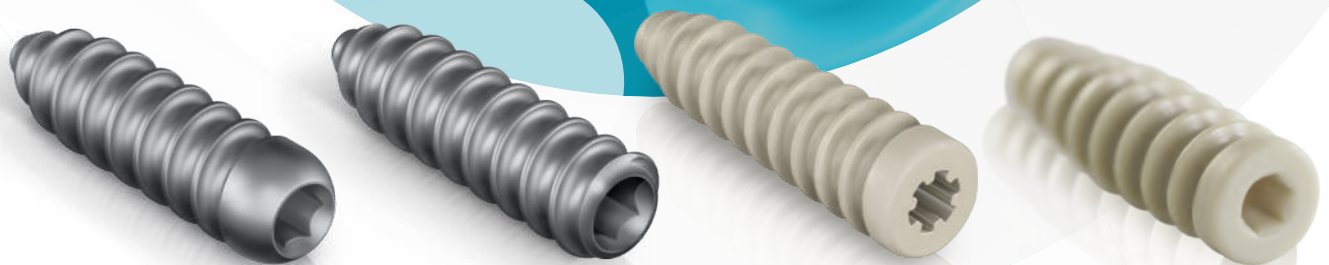

Spirom

LA SOLUCIÓN COMPLETA PARA REPARACIONES
DE TEJIDOS BLANDOS EN RODILLA

Spirom PK

FIJACIÓN SÓLIDA Y RENDIMIENTO EFICAZ

- Fabricado en PEEK, material bioinerte caracterizado por su resistencia y módulo de elasticidad similar al hueso cortical. Además, no interfiere en los estudios de diagnóstico por imágenes.
- **Spirom PK** está diseñado para todo tipo de injertos.
- La conicidad del cuerpo facilita la inserción en el hueso.
- Su cabeza plana protege al injerto y asegura un bloqueo máximo del túnel.



*Disponible en diámetros de 7 a 12 mm,
en diferentes longitudes.*

*Posee acople hexalobular que
garantiza una eficaz transmisión de fuerza
entre el destornillador y el tornillo.*



Spirom PK **Tenodesis**



*Disponible en diámetro de 6x19 mm de longitud.
Posee **alma hexagonal** y está diseñado para la
reposición y refijación de tendones en
reparaciones extracapsulares de rodilla.*

Spirom Ti / Ti FT / Ti BTB

DISEÑO OPTIMIZADO PARA UNA RÁPIDA INSERCIÓN

Spirom Ti



Spirom Ti FT



Spirom Ti BTB



Ø de 7 a 11 mm

Ø de 7 a 9 mm

- Fabricados en titanio de grado médico.
- Gracias a su diseño de rosca roma, **Spirom Ti** y **Spirom Ti FT** proveen una fuerte fijación al injerto de tejido blando sin lesionarlo.
- El modelo **Spirom Ti FT** posee un diseño de rosca completa, especial para fijación tibial, mejorando el agarre con la cortical ósea.
- **Spirom Ti BTB** está exclusivamente diseñado para la fijación de injertos hueso-tendón-hueso. Posee un diseño de rosca con filo para facilitar la inserción y perforación del tejido óseo.



Acople hexagonal óptimo
entre el tornillo y el destornillador.

UNA COBERTURA COMPLETA PARA REPARACIONES EN RODILLA

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Implante Titanio

Código	Descripción
FG-SC110725	Tornillo de interferencia de titanio Spirom Ti de 07x25
FG-SC110730	Tornillo de interferencia de titanio Spirom Ti de 07x30
FG-SC110825	Tornillo de interferencia de titanio Spirom Ti de 08x25
FG-SC110830	Tornillo de interferencia de titanio Spirom Ti de 08x30
FG-SC110925	Tornillo de interferencia de titanio Spirom Ti de 09x25
FG-SC110930	Tornillo de interferencia de titanio Spirom Ti de 09x30
FG-SC111025	Tornillo de interferencia de titanio Spirom Ti de 10x25
FG-SC111030	Tornillo de interferencia de titanio Spirom Ti de 10x30
FG-SC111125	Tornillo de interferencia de titanio Spirom Ti de 11x25
FG-SC111130	Tornillo de interferencia de titanio Spirom Ti de 11x30
FG-SC120720	Tornillo de interferencia de titanio Hueso-Tendón-Hueso, Spirom Ti BTB de 07x20
FG-SC120725	Tornillo de interferencia de titanio Hueso-Tendón-Hueso, Spirom Ti BTB de 07x25
FG-SC120820	Tornillo de interferencia de titanio Hueso-Tendón-Hueso, Spirom Ti BTB de 08x20
FG-SC120825	Tornillo de interferencia de titanio Hueso-Tendón-Hueso, Spirom Ti BTB de 08x25
FG-SC120920	Tornillo de interferencia de titanio Hueso-Tendón-Hueso, Spirom Ti BTB de 09x20
FG-SC120925	Tornillo de interferencia de titanio Hueso-Tendón-Hueso, Spirom Ti BTB de 09x25
FG-SC130725	Tornillo de interferencia de titanio con rosca completa, Spirom Ti FT de 07x25
FG-SC130730	Tornillo de interferencia de titanio con rosca completa, Spirom Ti FT de 07x30
FG-SC130825	Tornillo de interferencia de titanio con rosca completa, Spirom Ti FT de 08x25
FG-SC130830	Tornillo de interferencia de titanio con rosca completa, Spirom Ti FT de 08x30
FG-SC130925	Tornillo de interferencia de titanio con rosca completa, Spirom Ti FT de 09x25
FG-SC130930	Tornillo de interferencia de titanio con rosca completa, Spirom Ti FT de 09x30
FG-SC131025	Tornillo de interferencia de titanio con rosca completa, Spirom Ti FT de 10x25
FG-SC131030	Tornillo de interferencia de titanio con rosca completa, Spirom Ti FT de 10x30
FG-SC131125	Tornillo de interferencia de titanio con rosca completa, Spirom Ti FT de 11x25
FG-SC131130	Tornillo de interferencia de titanio con rosca completa, Spirom Ti FT de 11x30

Implante PEEK

Código	Descripción
FG-SC200723	Tornillo de interferencia de PEEK Spirom PK de 07x23
FG-SC200728	Tornillo de interferencia de PEEK Spirom PK de 07x28
FG-SC200823	Tornillo de interferencia de PEEK Spirom PK de 08x23
FG-SC200828	Tornillo de interferencia de PEEK Spirom PK de 08x28
FG-SC200923	Tornillo de interferencia de PEEK Spirom PK de 09x23
FG-SC200928	Tornillo de interferencia de PEEK Spirom PK de 09x28
FG-SC200935	Tornillo de interferencia de PEEK Spirom PK de 09x35
FG-SC201023	Tornillo de interferencia de PEEK Spirom PK de 10x23
FG-SC201028	Tornillo de interferencia de PEEK Spirom PK de 10x28
FG-SC201035	Tornillo de interferencia de PEEK Spirom PK de 10x35
FG-SC201128	Tornillo de interferencia de PEEK Spirom PK de 11x28
FG-SC201135	Tornillo de interferencia de PEEK Spirom PK de 11x35
FG-SC201228	Tornillo de interferencia de PEEK Spirom PK de 12x28
FG-SC201235	Tornillo de interferencia de PEEK Spirom PK de 12x35
FG-SC200619	Tornillo de PEEK Spirom PK Tenodesis de 06 x 19 mm

Instrumental asociado Titanio

Código	Descripción
FG-IN600000	Mango con cricket y conexión Small Hudson
FG-IN601100	Punta destornillador para tornillo de titanio
FG-CN313120	Guía de nitinol de 2 mm

Instrumental asociado PEEK

Código	Descripción
FG-IN600000	Mango con cricket y conexión Small Hudson
FG-IN601200	Punta destornillador para tornillo de PEEK y biocompuesto
FG-CN313111	Guía de nitinol de 1,1 mm
FG-IN602007	Macho roscador para tornillo de interferencia de 7 mm
FG-IN602008	Macho roscador para tornillo de interferencia de 8 mm
FG-IN602009	Macho roscador para tornillo de interferencia de 9 mm
FG-IN602010	Macho roscador para tornillo de interferencia de 10 mm
FG-IN601010	Punta para inserción fácil
FG-IN601011	Punta para extracción fácil
FG-IN601206	Punta destornillador para tornillo de PEEK y biocompuesto de 6 mm

Tornillos Spirom PK, Spirom Ti, Spirom Ti FT y Spirom Ti BTB.

Indicación de uso: Estos dispositivos están diseñados para proporcionar fijación interferencial en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior y posterior de la rodilla. En Ecuador: REGISTRO SANITARIO No. 16638-DME-0524 (Tornillos de PEEK). REGISTRO SANITARIO No. 16427-DME-0424 (Tornillos de titanio).

Tornillos Spirom PK Tenodesis.

Indicación de uso: se indican para la fijación de tejidos blandos, incluidos ligamentos y tendones, al hueso. Están diseñados para ser empleados en hombro, rodilla y tobillo. En Ecuador: REGISTRO SANITARIO No. 18096-DME-0225